

パルミコート[®]タービュヘイラー[®]を使用される患者さんへ

【監修】 亀田 誠 先生 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

使用する薬剤

- パルミコート[®]100μgタービュヘイラー[®]112吸入
- パルミコート[®]200μgタービュヘイラー[®]56吸入
- パルミコート[®]200μgタービュヘイラー[®]112吸入

用法・用量 指示された「用法・用量」を守りましょう。

朝 吸入 ・ 夜 吸入

服薬終了日 服薬終了日がきたら、新しい薬を使用しましょう。

年 月 日()



キャップを回して外し、吸入器をまっすぐ立てて持ちます。

新しい吸入器を使用するときは

茶色の回転グリップを左右に回して「カチッ」と2回鳴らします。その後①に進んでください。



新品を使うときだけですな!



① 右へ「クルッ」と回す

みぎ まわ
ちやいろ かいてん
茶色の回転グリップを
みぎ と まわ
右へ止まるまで回します。

まっすぐ立てるんですね!



② 左へ「カチッ」と戻す

ひだり もど
ちやいろ かいてん ひだり
茶色の回転グリップを左へ「カチッ」と
おと もど
音がするまで戻すと
やくさい きゆうにゆうぶん
薬剤が1吸入分セットされます。

「カチッ」が吸入できる合図なんですね!



茶色の回転グリップを持ちます。

③ 息を吐き、「スーッ」と深く吸い込む

「ハー」と大きく息を吐いた後、マウスピースをくわえ深く吸いあげてください。

さきにはいて〜




▲ マウスピースに息をふきかけないでください。

さらにもう1吸入する場合は、①～③を繰り返してください。



さいご かなら
最後に必ずうがい
または口すすぎをします。

薬の残量・終了の目安

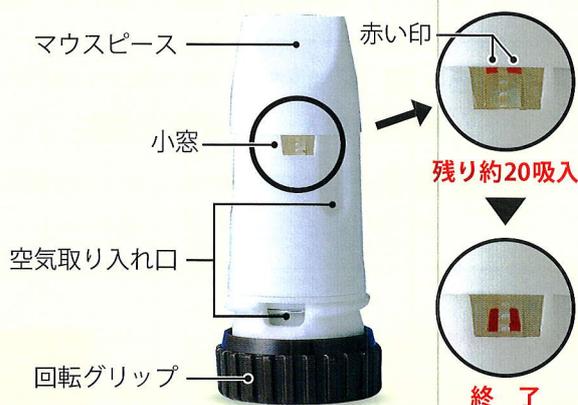

吸入器の小窓の上端に赤い印が見え始めたら、**残り約20吸入**の目安になります。

この赤い印は、茶色のグリップを回すごとに少しずつ下へ移動します。

赤い印が下までおりてきて、それ以上進まなくなったら**終了**です。

新しい吸入器と交換してください。

写真の赤い印は目安です。

赤い印が下まできても茶色の回転グリップは回り続けます。

吸入器を振ると「カサカサ」と音が聞こえますが、これは乾燥剤の音です。薬の残量ではありません。



Q&A

ご使用にあたってよくある質問

Q 「クルッ」「カチッ」を2回繰り返せば2吸入分まとめて吸入できますか？

A 2吸入分まとめて吸入はできません。

茶色の回転グリップを何度回しても薬は1吸入分しかセットされません。

2吸入する場合は、①「クルッ」②「カチッ」③「スーッ」の操作を2回行ってください。



Q 赤い印が小窓の下まできたのですが、「カサカサ」音がするからまだ残っていますか？

A 「カサカサ」音がするのは乾燥剤の音です。赤い印が小窓の下まできたら薬は使えません。

赤い印が小窓の下まできたら、吸入終了です。茶色の回転グリップは回り続けませんが使用せず、新しい吸入器と交換してください。容器を振ると「カサカサ」音がしますが、これは乾燥剤の音です。



Q 吸った感じがしないのですが、きちんと吸入できていますか？


A ①「クルッ」②「カチッ」③「スーッ」の操作をきちんとしていれば、吸入できています。

1回の吸入量がごくわずかなので、刺激が少なく吸った感じはしませんが、「クルッ」「カチッ」「スーッ」の操作をきちんと行なえていれば、薬は吸入できています。

確認方法

① ハンカチを使います。

マウスピースに色の濃いハンカチをかぶせて吸入してください。きちんと吸入できていればハンカチに1吸入分の薬剤が残ります。

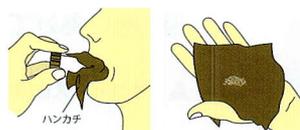

② 吸入練習器を使います。

バルミコートタービュヘイラー用吸入練習器を吸入し笛が鳴れば、お薬を吸入できることが確認できます。



お問い合わせ先

アストラゼネカ株式会社

受付時間/月～金 9:00～18:30 (土日・祝日除く)

メディカルインフォメーションセンター

医療関係者様 ☎ 0120-189-115

患者様 ☎ 0120-119-703